

Gebruiksaanwijzing



Premis Allround Indoor Outdoor Rollator

Pagina	1 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	27-05-2020	R. Keuning	Eerste uitgave

Producttype + artikelnummer:

ROALINO – Premis Allround Indoor Outdoor Rollator met duwbeugel, dienblad en mand.

Kleurvarianties:

ROALINOTG	Titanium Grijs
ROALINOTS	Titanium Zilver

Omschrijving van het product:

Design lichtgewicht rollator voor binnen- en buitengebruik voorzien van met foam gepolsterde duwbeugel, een beugellooprem, kunststof dienblad met daaronder een stoffen mand. 8 inch wielen, aluminium frame. De rollator is opvouwbaar. De rollator is verkrijgbaar in de frame kleuren titanium grijs en titanium zilver, beiden met een zwart dienblad en zwarte tas.

Past dit product bij u?

Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke product geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Handgreephoogte 82 – 92 cm Lengte 52 cm Breedte 72 cm Breedte opgevouwen 31 cm
Productgewicht:	7.4 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	136 kg
Wieldiameter:	8 inch – 20.32 cm
Andere eigenschappen:	Nylon tas (40*30*22 cm) Dienblad (42*30*3 cm) Duwbeugel met beugellooprem

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft!

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

Premis Allround Indoor Outdoor Rollator

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 135 kg dient niet te worden overschreden.
2. Controleer de remkabels en remfunctie voorafgaand aan gebruik.
3. Alle wielen dienen ten alle tijden in contact te zijn met de grond.
4. Gebruik de rollator niet op (rol)trappen, lopende banden of oneven oppervlakken.
5. Het dienblad is niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser of hete pannen.
6. Denk bij het gebruik van de opvouwbeveiliging om uw vingers, neem de gebruiksinstructies in acht.
7. Til de rollator alleen op indien u hier fysiek toe in staat bent en til de rollator niet boven uw macht uit. De rollator weegt 7.4 kg. Til vanuit uw benen en niet vanuit uw rug.
8. Til de rollator uitsluitend op door het frame vast te pakken. De rollator is niet geschikt om te worden getild vanaf de handvaten, duwbuizen, wielen of onderdelen van de mand en dienbladophanging.
9. Om kantelgevaar of framebreuk van de rollator te voorkomen: hang geen voorwerpen aan de rollator die hier niet voor bedoeld zijn. Gebruik uitsluitend door Premis goedgekeurde of door Premis speciaal ontwikkelde hulpstukken.
10. Breng geen wijzigingen aan op de rollator zonder autorisatie van Premis.
11. Repareer of vervang onderdelen van de rollator uitsluitend met originele onderdelen.
12. Laat de rollator jaarlijks preventief onderhouden om slijtage tijdig te ondervangen.
13. Let bij het lopen op dat u goed tussen de achterwielen van de rollator loopt en zo rechtop mogelijk blijft lopen, om vallen te voorkomen.
14. Gebruik de rollator niet wanneer deze beschadigd of defect is.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1x Rollator ROALINO met duwbeugel en beugellooprem

1x Dienblad (kunststof)

1x Mand (nylon-stof) (al bevestigd op de rollator)



Beoogd gebruik van het product:

De Premis ALINO rollator met duwbeugel en beugellooprem is bestemd voor gebruik bij mensen die slecht ter been zijn en extra ondersteuning behoeven tijdens het staan en lopen. De rollator biedt ondersteuning en stabiliteit. Hierdoor kan men langer zelfstandig verplaatsen, zowel binnenshuis als

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Premis Allround Indoor Outdoor Rollator

Pagina	3 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

buiten. De beugellooprem is geschikt voor mensen met een verminderde handfunctie, de rollator is met een hand te remmen en te sturen.

Contra-indicaties van het product:

Deze rollator is niet geschikt voor mensen die slechts korte stukjes kunnen wandelen. De rollator heeft geen zitje en biedt dus niet de mogelijkheid om overal waar nodig even te kunnen rusten.

Deze rollator is niet geschikt voor Parkinson patiënten of dementerende patiënten welke niet te allen tijde de controle kunnen bewaren over de rollator.

Deze rollator is niet geschikt voor mensen met verminderd zicht.

Deze rollator is niet geschikt voor zelfstandig gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking.

Deze rollator is niet geschikt voor mensen die niet zelfstandig kunnen blijven staan.

Klinische voordelen:

Deze rollator biedt meer en langer zelfstandigheid aan mensen die slecht ter been zijn. De rollator ondersteunt tijdens het staan en lopen, waardoor het risico op vallen sterk afneemt. Het kost mensen minder energie om te staan en lopen, waardoor zij dit langer vol kunnen houden.

De duwbeugel met beugellooprem biedt mensen die naast slecht ter been ook verminderde handfuncties hebben de mogelijkheid om zelfstandig te blijven bewegen.

Installeren voor gebruik:

1. Plaats de duwbeugel in het frame. (Afbeelding 1). Zet de rollator dan overeind.
2. Klap het reeds bevestigde mandje uit. (Afbeelding 2).
3. Klap de rollator uit door het voor- en achterframe uit elkaar te duwen. (Afbeelding 3).
4. Plaats de plastic opvouwebeveiliging op het middenframe om uzelf te verzekeren dat de rollator niet zomaar in kan klappen. (Afbeelding 4).
5. Plaats het kunststof dienblad in de metalen dienbladhouder. (Afbeelding 5).
6. Plaats de kabelgeleider op het frame. (Afbeelding 6).

Voorafgaand aan het eerste gebruik:

1. Pas de hoogte van de duwbeugel aan tot een juiste hoogte. U meet de juiste hoogte voor uw gebruik door de afstand tussen de grond en uw polsgewricht op te meten, wanneer u de armen ontspannen langs uw lichaam houdt.
2. Druk de plastic vergrendeling in om de duwbeugels te fixeren op de afgestelde hoogte. Let op dat de hoogte van de duwbuizen zowel links als rechts hetzelfde is. (Afbeelding 7).

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

Premis Allround Indoor Outdoor Rollator



Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning


Gebruiksaanwijzing

Premis Allround Indoor Outdoor Rollator

Gebruiksaanwijzing:

De rem vergrendelen en ontgrendelen

1. Druk de beugellooprem omlaag tot u een klik hoort. De rem is nu vergrendeld. (Afbeelding 8).
2. Knijp de beugellooprem helemaal in om de rem weer te ontgrendelen. (Afbeelding 9).

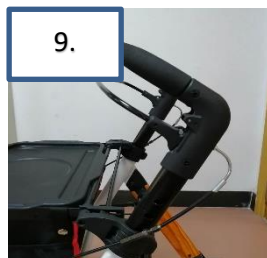

Remmen

1. Knijp de beugellooprem in om te remmen. Hoe verder u de rem inknijpt, hoe harder u remt.

De rollator vervoeren of opbergen

1. Verwijder het plastic dienblad. (Afbeelding 10).
2. Haal de opvouwbeveiliging los van het middenframe en vouw de mand in. (Afbeelding 11).
3. Duw het voor- en achterframe naar elkaar toe om de rollator in te klappen. De rollator is in staat om zelfstandig te blijven staan in de opgevouwen stand. (Afbeelding 12).




Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing

Premis Allround Indoor Outdoor Rollator

De rem afstellen

1. Draai de remkabelverstelling met de klok mee om de rem strakker in te stellen. (Afbeelding 13).
2. Draai de remkabelverstelling tegen de klok in om de rem lossler in te stellen. (Afbeelding 13).

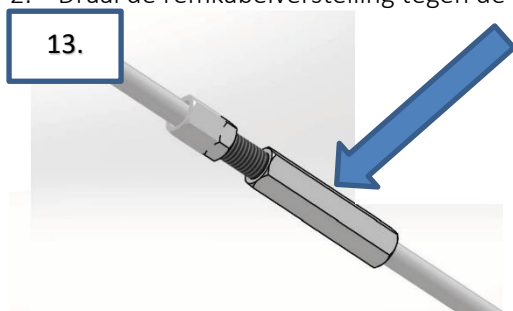

Reiniging van het product:

1. Reinig de rollator regelmatig met een lichtvochtige doek en een zachte zeep. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Test het schoonmaakmiddel vooraf op een onopvallende plek op de rollator en breng het schoonmaakmiddel niet rechtstreeks aan op de rollator.
2. Reinig het dienblad met de hand. Plaats het dienblad NIET in de vaatwasser.

Onderhoud van het product:

1. Wanneer u de rollator niet gebruikt; stal de rollator in een overdekte en droge ruimte, om roestvorming tegen te gaan.
2. Reinig regelmatig de rollator om ophoping van vuil in de bewegende delen tegen te gaan en te verwijderen.
3. Laat uw rollator tenminste 1x per jaar preventief onderhouden om versleten onderdelen te vervangen voordat zij defect gaan. Zo voldoet u aan de garantievoorwaarden en waarborgt u de veiligheid van het product.

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Premis Allround Indoor Outdoor Rollator

Technische specificaties:








Gebruikte materialen:	Aluminium, polyurethaan, verzinkt staal, lak
Productafmetingen:	Handvathoogte: 82 – 92 cm Lengte: 52 cm Breedte: 72 cm Breedte ingeklapt: 31 cm Wieldiameter: 8 inch – 20,32 cm
Productgewicht:	7.4 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	136 kg
Periodiek vervangbare onderdelen:	Wiellagers PU banden Remkabels Remschoentjes

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het product bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

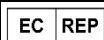Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
SN	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing



Premis Allround Indoor Outdoor Rollator

Foutopsporing:

Mogelijke Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
De wielen rollen niet meer	De lagers zijn versleten	Lagers vervangen
De handvaten verdraaien of komen los	De handvaten zijn uitgerekt of versleten	De handvaten vastlijmen met contactlijm of vervangen
Één van de wielen zweeft	<ol style="list-style-type: none"> De rollator is niet goed uitgekapt OF Het frame is scheef 	<ol style="list-style-type: none"> De rollator volledig uitklappen OF Het frame laten repareren
Het in- en uitklappen van de nieuwe rollator gaat stroef	De rollator is nog niet ingelopen.	De rollator meermaals achter elkaar uit- en inklappen tot het versoepelt.
Ik krijg last van mijn handen/armen/schouders bij het lopen	<ol style="list-style-type: none"> De duwbuizen staan verkeerd afgesteld OF U heeft last van trillingen door oneffen ondergronden 	<ol style="list-style-type: none"> De duwbuizen juist afstellen OF De PU banden vervangen OF Vermijd oneffen ondergronden
De remmen remmen niet voldoende	<ol style="list-style-type: none"> Het remschoentje is versleten OF De remmen zijn verkeerd afgesteld 	<ol style="list-style-type: none"> Het remschoentje vervangen OF De remmen juist afstellen
De remkabels blijven haken aan deuren etc.	De remkabelgeleiders zijn losgekomen	De remkabelgeleiders vervangen

Wat te doen bij een ernstig voorval?

Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij, het ontwerpen of uitleveren van het product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren.

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning

Gebruiksaanwijzing






Premis Allround Indoor Outdoor Rollator

Pagina	9 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

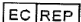 Fabrikant	
Premis Medical BV. De nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands	 

Versie:	1.0	Klassificatie:	Publiek gebruik
Status:	In gebruik		
Datum:	27-05-2020	Auteur:	R.Keuning

User Manual



Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker

Pagina	10 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

Revisions

Revision	Date (dd-mm-jjjj)	Author	Description of the change
V.1.0	27-05-2020	R. Keuning	First release

Producttype + artienummer:

ROALINO – Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled walker with pushbar, tray and basket.

Colour variations:

ROALINOTG	Titanium Grijs
ROALINOTS	Titanium Zilver

Product description:

Design lightweight wheeled walker for indoor and outdoor use, with foam covered push bar, bar brakes, plastic tray and fabric basket underneath. 8" wheels, aluminum frame. The walker is foldable and available in the frame colours titanium gray and titanium silver, both with a black tray and basket.

Is this product the right fit for you?

The product you have bought has a number of specifications one must keep in mind. These specifications are described underneath, so that you can check if this product suits your needs.

Product dimensions (l*w*h):	Handle height 82 – 92 cm Length overall 52 cm Width overall 72 cm Width when folded 31 cm
Product weight:	7.4 kg
Maximum user weight:	136 kg
Wheel diameter:	8 inch – 20.32 cm
Other specifications:	Nylon basket (40*30*22 cm) Tray (42*30*3 cm) Pushbar with bar brakes

If any of these specifications is not suitable for your needs, please contact the retailer as soon as possible!

Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning

User Manual



Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker

Pagina	11 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

Warnings and Safety Instructions:

15. The maximum acceptable weight of the user is 136 kg and may not be exceeded.
16. Check the brakes before use.
17. All wheels must touch the floor at all times.
18. Do not use the walker on escalators, stairs, moving sidewalks or uneven surfaces.
19. The tray is not suitable for cleaning in dishwashers or hot pans.
20. Pay attention to your fingers when using the folding mechanism. Keep the user instructions in mind.
21. Only lift the walker if you are physically capable to do so and do not lift the walker above your power. Lift the walker with your legs and not with your back.
22. Only lift the walker by holding the frame. The walker is not meant to be lifted by the handles, bars, wheels or parts of the basket and tray suspension.
23. To prevent damage and turn over: do not hang items on the walker that are not meant for this. Only use items that are specifically designed or approved by Premis for this purpose.
24. Do not make any changes to the exterior of the walker without written permission of Premis.
25. Only repair or change parts of the walker with original parts.
26. Make sure the walker is maintained and checked at least once a year.
27. Make sure that you walk in between the hind wheels when using the walker and maintain as much of an upright posture as possible, to prevent falling.
28. Do not use the walker if it's damaged or incomplete.

Included in the packaging of this product:

- 1x Wheeled walker ROALINO with push bar and bar brakes
- 1x Tray (plastic)
- 1x Basket (Nylon fabric) (attached to walker)



Intended use of the product:

The Premis Alino walker with pushbar and bar brakes is intended for use by people with reduced mobility and are in need of extra support when walking and standing. The walker offers support and stability, so that people can remain independent as long as possible, both indoors and outdoors. The pushbar is suitable for people with reduced hand functions; the walker can be steered and braked with one hand.

Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning

User Manual



Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker

Pagina	12 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

Contra-indications of the product:

The walker is not suitable for people who can only walk short distances. The walker has no seat and therefore does not provide the possibility to sit down and rest whenever needed.

The walker is not suitable for Parkinson patients or patients with dementia, who can not control the walker on their own at all times.

The walker is not suitable for people with reduced eye sight.

The walker is not suitable for independent use by people with mental disabilities.

The walker is not suitable for people who cannot stand upright independently.

Clinical benefits:

This walker provides more and longer independency to people that have reduced mobility. The walker supports walking and standing, and therefore reduces the risk of falling. It also costs people less energy to stand and walk, so that they can keep it up for longer amounts of time and walk longer distances.

The pushbar with bar brakes also provides people that have both reduced mobility and reduced hand functions, because the walker can be operated with just one hand.

Install before use:

7. Place the pushbar into the frame (Picture 1). Place the walker upright.
8. Fold down the already installed basket (Picture 2).
9. Unfold the walker by pushing the frontwheel support and hindwheel support apart. (Picture 3).
10. Place the plastic folding fixture on the center of the frame, to ensure the walker will not suddenly fold back in when in use. (Picture 4).
11. Place the tray in the metal tray suspension (Picture 5).
12. Place the cable guard on the frame. (Picture 6).

Before the first use:

3. Adjust the height of the pushbar to the correct height. You can measure the correct height by measuring the distance between the floor and your wristjoint, when you have your arms hanging down alongside your body.
4. Press the plastic fixture to fixate the pushbar on the correct height. Make sure that the height of the bar is equal on both the left and right side. (Picture 7).

Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning

User Manual

Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker



Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning


User Manual

Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker

User Instructions:

Locking and unlocking the brakes

3. Push the bar brakes down until you can hear a clicking sound. The brakes are now locked. (Picture 8).
4. Press the bar brakes to the pushbar as far as possible to unlock the brakes. (Picture 9).

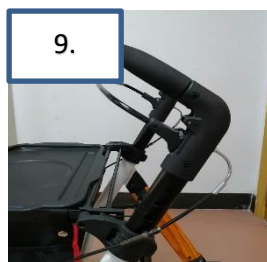

Braking

2. Press the bar brakes to brake. The further you press the bar brakes, the more the brakes slow down the walker.

Transport or storing the walker

4. Remove the plastic tray. (Picture 10).
5. Remove the folding fixture from the middle frame and fold down the basket. (Picture 11).
6. Push the front and back frame towards each other to fold in the walker. The walker can stand upright on its own when folded. (Picture 12).




Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning

User Manual

Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker

Adjusting the brake intensity

- Turn the brake adjustment clockwise to tighten the brakes and improve brake intensity. (Picture 13).
- Turn the brake adjustment counter-clockwise to loosen the brakes and decrease brake intensity. (Picture 13).

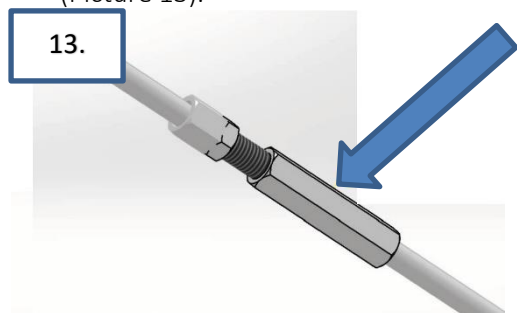

Cleaning of the product:

- Clean the walker regularly with a damp towel and a non-aggressive soap. Do not use acidic or scrubbing cleaning detergents. Test the cleaning product on an unnoticeable spot on the walker before cleaning to make sure it does not damage the walker. Do not apply any cleaning product directly onto the walker.
- Clean the tray by hand. Do NOT put the tray in a dishwasher!

Maintenance of the product:

- When the walker is not in use; store the walker in a covered and dry area, to prevent oxidation and rust.
- Clean the walker regularly to remove and prevent collection of dirt on moving parts.
- Ensure that the walker is maintained and checked at least once a year to replace worn parts before they break. Not maintaining the walker is a direct void of any warranty and may lead to decreased safety when using the product.

Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning

User Manual



Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker

Pagina	16 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

Technical specifications:

Used materials:	Aluminum, polyurethane, galvanised steel, varnish
Product dimensions:	Handle height: 82 – 92 cm Length: 52 cm Width: 72 cm Width when folded: 31 cm Wheel diameter: 8 inch – 20,32 cm
Product weight:	7.4 kg
Maximal user weight:	136 kg
Periodically replaceable parts:	Wheel bearings PU wheels Brake cables Brake blocks

Warranty:

The warranty period starts on the date of purchase. When ordered online this date is the shipping date as provided on the invoice.




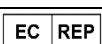


3. Void of warranty:

- a. Using the product for any purpose or in any manner other than its intended use as described in this manual.
- b. When a change or repair of the product is made, which has not been authorized by Premis Medical.

4. Warranty definitions:

- a. Shipping fees for returning a product are not included in the warranty. A return form must be requested and filled out before shipping the product to Premis Medical.
- b. The warranty term of the product amounts to 24 months starting from the date of purchase.
- c. The warranty term of wear sensitive parts and dynamic parts of the product amounts to 6 months starting from the date of purchase.

Explanation of symbols:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Manufacturer
	Production date		Approved by the European Union
SN	Serial Number		Authorized European Representative
	User Manual is available online		Read the User Manual before use

Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning



Pagina	17 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

Troubleshooting:

Potential problems	Potential causes	Potential solutions
The wheels do not roll anymore.	The wheel bearings are worn out.	Replacet he wheel bearings.
The handles turn or come loose.	The handles are worn out or stretched.	Replace the handles or glue them down with contact glue.
One of the wheels is floating / does not touch the floor.	3. The walker is not properly unfolded OR 4. The frame is crooked	3. Unfold the walker completely OR 4. Get the frame repaired
Folding the new walker is difficult	The walker is not yet properly walked in.	Fold and unfold the walker several times in a row until it goes smoother.
My hands/arms/shoulders start to hurt when I use the walker.	3. The pushbar is not properly OR 4. You experience a lot of vibrations from the uneven surface you walk on.	3. Correctly adjust the pushbar OR 4. Replace the PU Wheels OR Avoid walking on rough or uneven surfaces
The brakes do not brake sufficiently.	3. The brake blocks are worn out OR 4. The brakes are not adjusted correctly.	3. Replace the brake blocks OR 4. Adjsut the brake intensity
The brake cables get caught on door handles and the like.	The brake cable guides have come off.	Replace the brake cable guides.

What to do in case of a severe accident?

In case a serious accident happens that involves this walking aid, we request you to inform the manufacturer as soon as possible. If necessary the manufacturer will be able to take measures to prevent future accidents and guarantee a safe use of the product.

Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning

User Manual






Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker

Pagina	18 van 18
Doc.nr.	G.1.1.4.2.3.1. ROALINO
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	27-05-2020

Guidelines and regulations

- All products sold by Premis Medical are CE approved. Furthermore, we meet the international ISO standards for Medical Aids through our ISO 9001 certification. Therefore, you can trust on a safe use of the product you purchased and are guaranteed of a quality product.
- When applicable our products meet the MDD and MDR regulations.
- All products of Premis Medical meet the applicable laws and regulations.

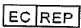 Manufacturer
Premis Medical BV. De nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands
 

Version:	1.0	Classification:	Public use
Status:	In use		
Date:	27-05-2020	Author:	R.Keuning