



max vitaal 
zorghulpmiddelen
www.max-vitaal.nl



Q50R & Q50R carbon

Eenvoudig op te bergen & lichter meenemen



Q-Serie
Elektrische rolstoelen



Q50 R

Q50 R Carbon

DESIGN

START JE ZOEKTOCHT MET DE Q50 R & DE Q50 R CARBON.

Heb je genoeg van grote elektrische rolstoelen of scootmobielen die alle ruimte in beslag nemen? Zeg dan hallo tegen de **QUICKIE Q50 R** en de **QUICKIE Q50 R CARBON**. Twee compacte, ruimtebesparende elektrische rolstoelen die makkelijk en binnen een paar seconden opgevouwen kunnen worden tot het formaat van een koffer. Ideaal om netjes op te bergen of mee op pad te gaan!

136 KG

MAXIMAAL GEBRUIKERSGEWICHT

De **Q50 R** heeft een gewicht van 32 kg (excl. accu's 5,5 kg) en de **Q50 R Carbon** zelfs slechts een gewicht van 14,5 kg (excl. accu 1.4 kg). Beide rolstoelen kunnen een gebruikersgewicht tot maximaal **136 kg dragen!**



MODELLEN

Q50 R

Als je eropuit wilt gaan dan kun je rekenen op de bijzondere prestaties van de **Q50 R**. Met een grote actieradius van maar liefst 50 km* kun je overal naar toe gaan zonder je druk te maken over de accucapaciteit. Daarnaast is deze rolstoel voorzien van een dubbele vering, voor- en achterzijde, voor extra rijcomfort en grip. De uitstekende kwaliteitsmotoren leveren eerste klas prestaties, zijn energiezuinig en onderhoudsvriendelijk. Dat is prettig! Bovendien is de **Q50 R** gebouwd op meer dan 40 jaar ervaring in elektrische rolstoelen zodat je erop kunt vertrouwen dat hij je overal veilig naar toe rijdt.



KENMERKEN

- Duurzaam aluminium frame
- Makkelijk op te vouwen en op te bergen
- Comfortabel rijden door dubbele vering en meer grip met meer tractie dankzij de grote 12" aandrijwielen
- Goed zitten door in hoogte verstelbaar rugframe, rugleuning en de zitting zijn voorzien van naspanbare spanbanden, schuimkussen van 50 mm hoog
- Gewicht zonder accu 32 kg



Q50 R



Scan de QR met de camera van je smartphone om de video te bekijken.

*Volgens ISO EN12184

Q50 R carbon

Wat je bestemming ook is, de **Q50 R Carbon** is je perfecte reisgezelschap. Deze rolstoel heeft een gewicht van slechts 14.5 kg (zonder accu's) en is gemaakt van eerste klas koolstofvezel. Daardoor kan deze elektrische rolstoel moeiteloos opgetild worden. Bovendien is hij gemakkelijk op te vouwen (zonder de accu's te verwijderen) zodat deze rolstoel direct mee kan in de auto en zelfs in het vliegtuig. De **Q50 R Carbon** heeft een actieradius van 24 km* en is verkrijgbaar met 5 verschillende accentkleuren.



KENMERKEN

- Sterk en duurzaam carbon frame
- Zeer compact op te vouwen, gemakkelijk op te bergen
- Gemakkelijk op te tillen en mee te nemen in auto en vliegtuig. Inclusief handige transportband, rolstoel blijft strak opgevouwen
- Extra zichtbaar door super heldere dagrijverlichting
- Gewicht zonder accu 14.5 kg



Q50 R Carbon




Scan de QR met de camera van je smartphone om de video te bekijken.

GA OP PAD!

De Q50 R en zeker de Q50 R Carbon kunnen zeer compact opgevouwen worden zodat deze rolstoelen bijna overal in passen. Neem de trein, stap in het vliegtuig of berg de rolstoel op in de kofferbak van zelfs de kleinste auto. Je zult zien dat het makkelijk gaat zodat jij jouw horizon kunt gaan verbreden.

MOEITeloos OPVouwen

1. Trek de clip aan de achterzijde omhoog
2. Klap de voetplaat in
3. Duw de rugleuning naar beneden om de rolstoel in zijn geheel op te vouwen. U hoeft de accu niet eens te verwijderen. Hoe simpel is dat?

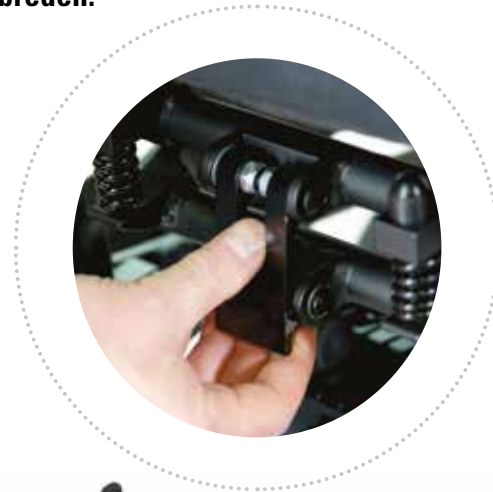



LENGTE

800 mm

570 mm (Carbon)

HOOGTE

400 mm

767 mm (Carbon)



Q50 R Carbon

STANDAARD TRANSPORTBAND

De **Q50 R Carbon** is standaard voorzien van een transportband waardoor deze rolstoel strak opgevouwen blijft en deze niet uitelkaar klappt tijdens het optillen.



AFNEEMBARE LITHIUM-ION BATTERIJ!

RIJDEN

PRESTATIES BUITENSHUIS.

Plaatsen bezoeken, mensen ontmoeten?

De Q50 R & de Q50 R Carbon zijn niet alleen compact en ruimtebesparend. Deze rolstoelen zijn voorzien van allerlei componenten om je ook buitenshuis comfortabel en veilig naar plaats van bestemming te brengen.

DUBBELE VERING - MEER RIJCOMFORT

De **Q50 R** is voorzien van twee veringen zodat schokken en trillingen opvangen worden. Een elastomeer demping aan de voorzijde en spiraalveren onder de zitting (achterzijde) zorgen voor extra comfort en grip voor de beste rijervaring. Ga er lekker en comfortabel op uit!

KLEIN IN FORMAAT - COMFORTABEL RIJDEN

Het rijden met de **Q50 R Carbon** is ondanks zijn kleine formaat en lichte gewicht uitermate comfortabel. Het Carbon frame is zodanig geconstrueerd dat er precies genoeg flex in het frame aanwezig is om als vering te dienen zonder in te leveren op stevigheid en duurzaamheid. Carbon is hiervoor als materiaal uitermate geschikt.

Q50 R



IATA GOEDGEKEURD* VOOR VliegREIZEN

Wilt u naar het buitenland reizen? De lithium-ion batterij van de **Q50 R Carbon** is goedgekeurd door de IATA* (International Air Transport Association) voor vervoer per vliegtuig.

* Elke luchtvaartmaatschappij heeft verschillende eisen met betrekking tot het transport van hulpmiddelen met Li-Ion accu's. Voordat je een vliegreis met de rolstoel regelt, dien je bij jouw luchtvaartmaatschappij of vervoerder te bevestigen dat zij voertuigen op batterijen accepteren onder de VN-classificatie: UN3171. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.


OPLADEN, ZELFS AL DEZE OPGEVOUWEN IS

Omdat je bij het opvouwen de accu niet hoeft te verwijderen, kun je deze rolstoelen ook makkelijk in opgevouwen stand via de laadpoort in de stuurkast opladen.



DAGRIJVERLICHTING

Ben overdag en in de avond zichtbaar met deze super heldere dagrijverlichting (alleen op **Q50 R Carbon**). Deze verlichting zit aan de achterzijde en gaat automatisch aan wanneer de rolstoel rijdt.

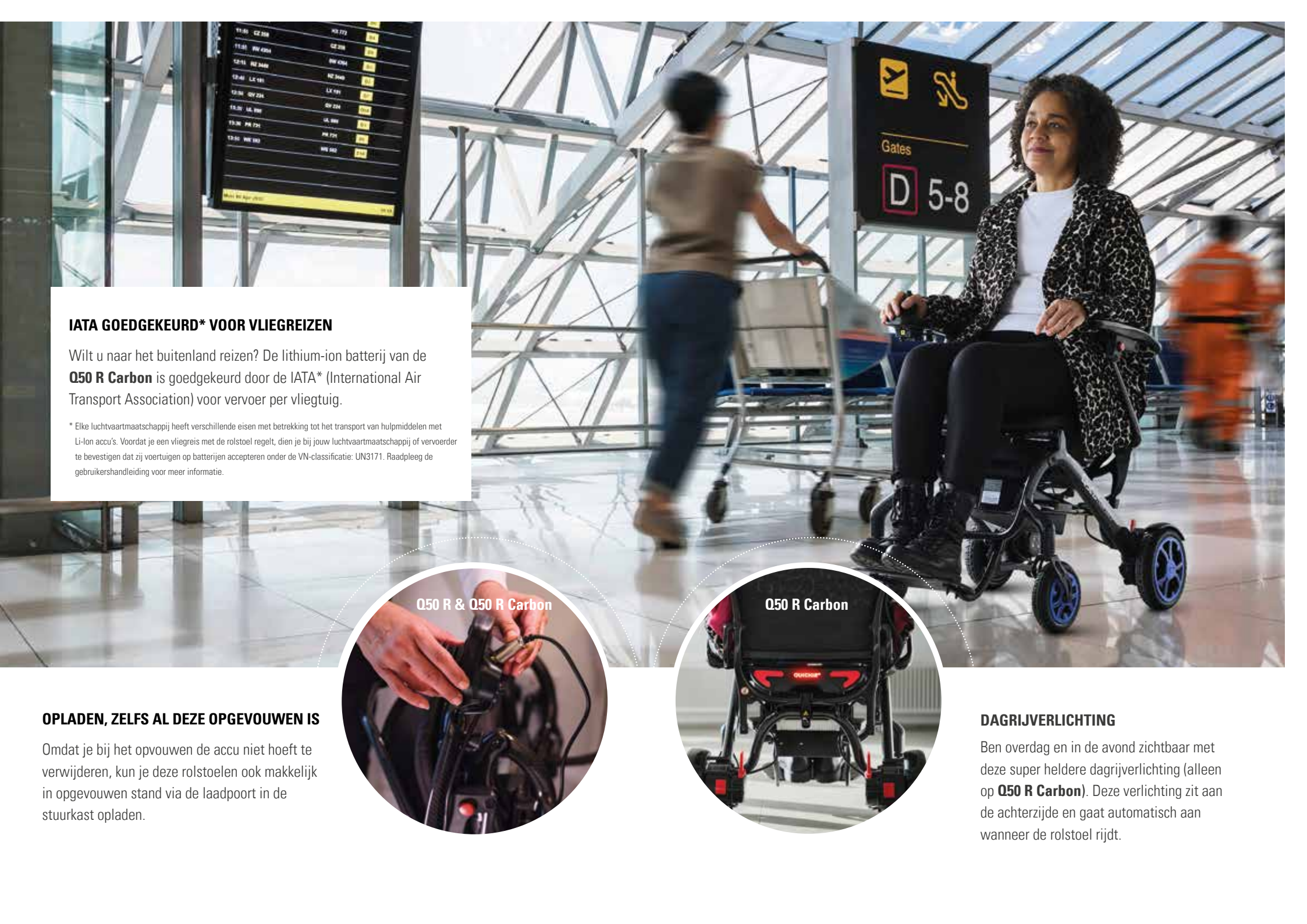

PRESTATIES

... WENDBAAR BINNENSHUIS.

Of het nu thuis is, in een drukke winkel of in het openbaar vervoer, door het compacte formaat en de intuïtieve bediening van de **Q50 R & Q50 R Carbon** is geen ruimte te smal en rijd je overal tussendoor.

KLEINE DRAAICIRKEL

In tegenstelling tot een scootmobiel heeft de **Q50 R** een kleine draaicirkel van 1220 mm en de **Q50 R Carbon** een zeer kleine draaicirkel van slechts 800 mm waardoor deze rolstoelen ideaal zijn voor binnengebruik. Je draait makkelijk 360 graden in smalle kamers, gangpaden en andere kleinere ruimtes.

COMPACTE BREEDTE

Met een breedte van slechts 600 mm voor de **Q50 R** en 570 mm voor de **Q50 R Carbon** versie zijn smalle deuropeningen en drukke kamers geen probleem meer!



IN HOOGTE VERSTELBAAR RUGFRAME

Hogere rugsteun nodig? Geen probleem voor de **Q50 R**. Het rugframe is eenvoudig te verstellen door twee schroeven aan de achterzijde. De rugbekleding is luchtdoorlatend en heeft aan de achterzijde een afsluitbaar opbergvak. Het schuimkussen van 50 mm biedt een comfortabele zit en is voorzien van een luchtdoorlatende hoes. Onder de zitting zit een grote tas met rits om spullen op te bergen.


Q50 R



MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK

De ultralichte rugleuning van de **Q50 R Carbon** houdt je niet alleen comfortabel, de ademende bekleding laat lichaamswarmte door, waardoor je koel en droog blijft. Daarnaast is deze rolstoel standaard voorzien van een **30 mm** schuimkussen dat prettig zit tijdens langere reizen.


Q50 R Carbon

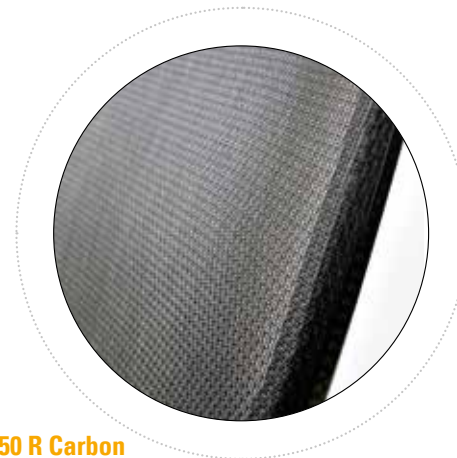

GEMAKKELIJKE TRANSFERS

Stap gemakkelijk in- en uit de **Q50 R** & de **Q50 R Carbon**. Door de armsteunen omhoog te klappen, heb je alle ruimte voor een zijdelingse transfer. Klap de voetsteun omhoog voor een voorwaartse transfer. Je kunt hierbij leunen op de stabiele armsteunen.

**Q50 R &
Q50 R Carbon**

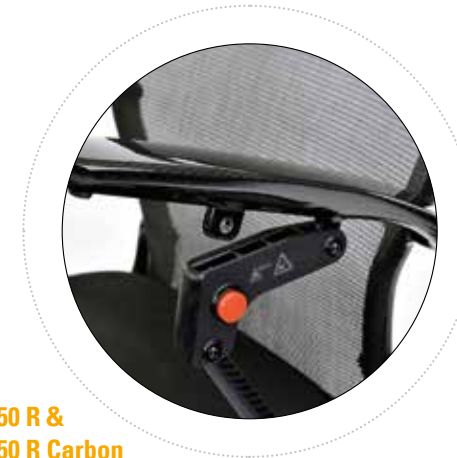

BETROUWBAAR

BEWEZEN PRESTATIES.

De Q50 R en de Q50 R Carbon zijn gebouwd op meer dan 40 jaar ervaring in het ontwerpen en bouwen van elektrische rolstoelen. Deze lichtgewicht opvouwbare staan garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en de allerbeste rijprestaties.

INTUÏTIEVE BEDIENING

Het gebruik van een elektrische rolstoel in kleinere ruimtes vraagt om precisie in bewegingen. Daarom zijn de **Q50 R** & **Q50 R Carbon** voorzien van betrouwbare besturingssystemen met bewezen en betrouwbare technologie. Eenvoudig en intuïtieve besturingssystemen die direct en nauwkeurig reageren op jouw bewegingen zodat je soepeltjes overal langs af of tussendoor rijdt.



LAGE DUWWEERSTAND

Zet je de **Q50 R** & de **Q50 R Carbon** in zijn vrijloop, dan bieden deze rolstoelen weinig weerstand tijdens het duwen. De vrijloop is ook te gebruiken om deze rolstoelen te verplaatsen wanneer deze opgevouwen zijn.

DE FINISHING TOUCH.

De Q50 R & de Q50 R Carbon hebben een mat zwart frame dat te combineren is met leuke accentkleuren. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren. Kies de kleur die het beste bij je past!

Q50 R



Q50 R CARBON



Maak een afspraak bij een dealer bij jou in de buurt voor een vrijblijvende testrit. Zo ervaar jezelf de voordelen van deze compacte en opvouwbare elektrische rolstoelen!



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Q50R	Q50 R Carbon
Totale afmetingen (L/B/H)	855 - 1030 mm / 600 mm / 905 - 1005 mm	923 mm / 570 mm / 928 mm
Opgevouwen afmetingen (L/B/H)	800 mm / 600 mm / 400 mm	370 mm / 570 mm / 767 mm
Zitdiepte	450 mm (zitkussendiepte)	420 mm (zitkussendiepte)
Zitbreedte	430 mm (zitkussenbreedte)	440 mm (zitkussenbreedte)
Rughoogte	450 - 550 mm	464 mm
Max. obstakelhoogte	50 mm	40 mm
Actieradius (ISO 7176-4)	50 km	12 km (24 km met additionele accu)
Gewicht zonder accu	32 kg	14.5 kg
Gewicht accu	5.5 kg	1.4 kg
Max. gebruikersgewicht	136 kg	136 kg
Aandrijfwielen	12" massief	8" massief
Voorwielen	8" massief	6.5" massief
Max. hellingshoek	10°	6°
Draaistraal	609 mm	800 mm
Draairuimte (min. benodigde ruimte om te draaien)	1100 mm	1100 mm
Max. snelheid	6 km/u	6 km/u
Accu	30 Ah, Lithium-Ion	10 Ah Lithium-Ion
Besturingssysteem	VSI	VR2
Motoren	Koolborstelloze 200 Watt	Koolborstelloze 250 Watt
Accentkleuren	Rood, blauw, groen	Rood, blauw, oranje, geel, paars

